
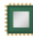







## Installationsguide til Quick ID

Når du har oprettet alle med brugernavn og adgangskode, er du klar til at installere Quick ID.

1. Sæt Quick ID læserne i de arbejdsstationer, hvor de skal anvendes. Plandent Quick ID læsere er installeret med DentalSuite firmware og fungerer som plug-and-play med Windows 10. Har du Windows 7 eller 8 skal du installere en driver (se video på vores website).
2. Nu skal du finde Comport nr. for at sætte det op i DentalSuite.
3. Gå til start og skriv "enhedshåndtering" (eller "device manager" hvis I har en engelsk version af Windows)

4. Find Porte (COM og LPT)
  - >  Porte (COM og LPT)
  - >  Processorer
  - >  Sikkerhedsenheder

5. Notér port nr. I dette eksempel er port nr. 3
  -  Porte (COM og LPT)
  -  Serial USB-enhed (COM3)

6. Nu skal du tilbage til din DentalSuite:  
Gå til System > Generelt > Opsætning af Quick ID. Indtast port nr. 3 og klik OK
7. Genstart DentalSuite
8. Nu er du klar til at bruge Quick ID. Log på første gang på tastaturet med brugernavn og adgangskode
9. Hold brikken hen over læseren og indtast dit brugernavn og adgangskode én gang til
10. Brikken er nu "din" de næste 8 timer. Hold blot brikken henover læseren for at logge ind eller ud
11. Se også vores video: Sådan anvender du Quick ID (ligger på vores website).